


使い捨てマスクの着け方と外し方

着け方

POINT

鼻と口、あごまで
きちんと覆う！

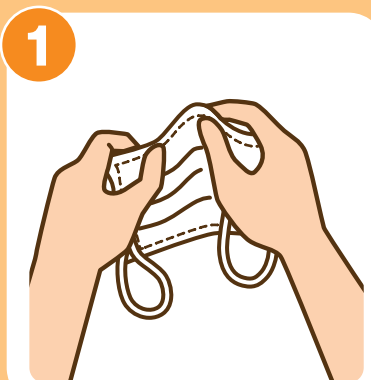

ノーズピース部分に
折り目をつける



ゴムひもを耳にかける



針金を顔の形に合わせる




蛇腹をあごの下まで
伸ばし、鼻と口を覆う

外し方



汚染面に触れないように
ゴムひもを外す

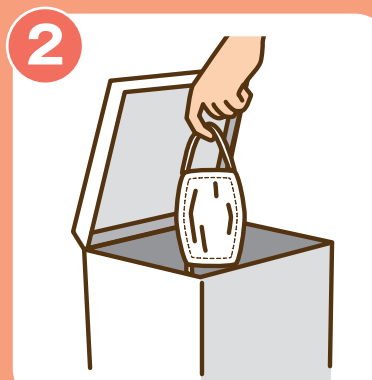

汚染面に触れないように
ゴムひもを持って廃棄する

POINT

- 使い捨てマスクの再着用はしない
- 素手で汚染面に触れないように外し、廃棄する
- マスクを外した後、手指衛生を行う