


使い捨て手袋の着け方と外し方


着け方

①

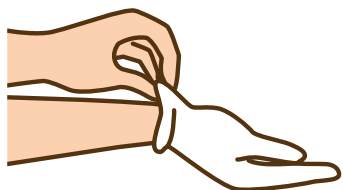

手袋の手首の部分をつかんでめくる

②

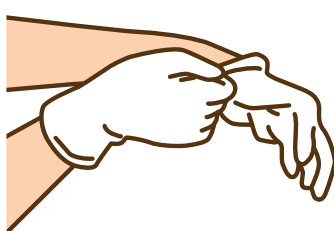

反対の手も①同様に手袋を着用する

POINT

- 使い捨て手袋の再着用はしない
- 素手で汚染面に触れないように外し、廃棄する
- 手袋を外した後、手指衛生を行う


外し方

①



片方の手袋の袖口をつかむ

②

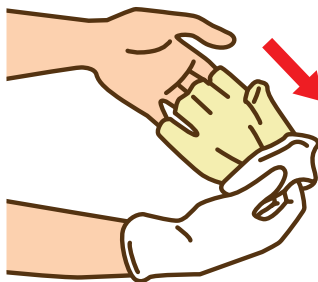


手袋を裏表逆になるように外す

③



手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む

④

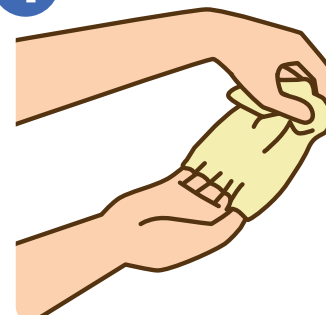

手袋を裏表逆になるように外し、廃棄する